





# VIDAS®: Funcionamiento y Calidad reconocida, ahora unidos en un diseño más actual

### Diseño perfeccionado para mayor comodidad del usuario

Partiendo de sus necesidades, presentamos un nuevo diseño para:

- Mejorar el flujo de trabajo, optimizando la carga de pruebas
- Incrementar la comodidad, en la introducción de datos y en la obtención de resultados de los pacientes

## VIDAS®: Ahorro de tiempo

- Reactivos de dosis únicas, listos para usar. (1 prueba = 1 paciente)
- Todos los reactivos incluidos en los kits
- Sistema robusto (MTBF\* > 700 días)
- 2. Calibración cada 14 días
  - Identificación automática por código de barras
  - Sólo cargar y procesar

Flexibilidad, donde y cuando usted lo necesite

- 5 secciones independientes con 6 posiciones cada una
- Procesamiento simultáneo de diferentes parámetros
- Amplio menú de rutina (más de 80 parámetros de inmonoqiímica y enfermedades infecciosas)
- 5. Presentación de 30 ó 60 pruebas

#### Calidad

- 6. Sin contaminación cruzada
  - Pruebas de referencia: VIH Ultra, D-Dimer Exclusión, Toxo Avidez...
  - Probado con numerosos controles externos de calidad por sus excelentes coeficientes de variación *CV*

1. Dimensiones

Altura: 45 cm Anchura: 88 cm Fondo: 55 cm

Peso 65 kg

Requerimientos de energía

Voltaje: 100-240 VAC Consumo: 3-1.2 A Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 280 VA máximo Emisión de calor: 921 BTU/h



pagina 2





# do para Perdurar

activos y equipos VIDAS® es reconocida en todo su calidad, sencillez, flexibilidad y precisión. depende del conocimiento de las necesidades daptándonos a éstas para facilitar el trabajo prios actuales.





## La Simplicidad marca la diferencia

El sistema VIDAS® utiliza reactivos de dosis única, listos para usar


- El Cono (SPR †), actúa como fase sólida de la reacción.
- El Cartucho (Strip), contiene todos los reactivos nececesarios para la reacción. 2



En cada etapa de la reacción, los reactivos se aspiran dentro y fuera de él. Este original concepto previene cualquier tipo de contaminación entre muestras ó entre reactivos. En suma, la ausencia de tubos, jeringas y agujas, reduce al mínimo el mantenimiento del sistema.

#### VIDAS® utiliza el principio ELFA

Combinando el método ELISA con una lectura final en fluorescencia azul. Esta tecnología asegura excelentes resultados de sensibilidad y especificidad.

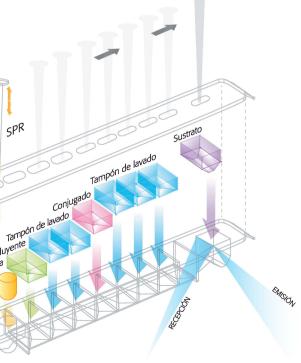

pagina 3



# VIDAS, Diseñado para perdurar

**Fácil de usar:** Sólo cargar y procesar **Sistema robusto:** (MTBF\* > 700 días)

Pruebas de alta calidad para un diagnóstico confiable Sólución de óptimo costo-beneficio

- Prueba unitaria
- Todo incluido en el kit
- Presentación práctica (30 ó 60 pruebas)

VIDAS y miniVIDAS: opciones que se adaptan a su organización

# VIDAS, una solución adecuada a su trabajo diario

#### Pruebas de Rutina

- Hasta 30 parámetros en cada corrida
- Oferta completa de páneles (Tiroides, fertilidad, marcadores cardíacos, marcadores tumorales, VIH, hepatitis, ToRCH...)

### **Pruebas Complementarias y Especiales**

- Pruebas confirmatorias (VIH DUO, Toxo Avidez, Dímero D Exclusión...)
- Pruebas especiales (H. pylori. C. Difficile A/B, Chlamydia, Alergia...)

# Pruebas de Emergencia 4.

- Disponible 24/7
- Resultados rápidos
- Pánel de Emergencia: Troponina I, Mioglobina, NT-proBNP,
  DD Exclusión, Procalcitonina

<sup>\*</sup> Tiempo medio entre fallas de funcionamiento



Aviso de Publicidad: 153300202C7998 Registro Sanitario: 2836E2012 SSA

